

Release Notes tiamo 2.2 Patch 2

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der Software-Version **tiamo 2.2 Patch 2 (Build 81-2)** und der Version **tiamo 2.2 Patch 1 (Build 81-1)**.

2 Behobene Fehler und Probleme


Programmteil Arbeitsplatz

- Wurde während einer volumetrischen Karl-Fischer-Titration (KFT) mit automatischer Driftkorrektur auf eine Messwert-Drift von 0.0 µL/min titriert (d. h. übertitriert), so wurde beim nächsten Titrationsstart der Wert für die Startdrift nicht mehr aktualisiert.

3 Compliance


Die aktuelle Software-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **tiamo** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 18. Dezember 2015



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung

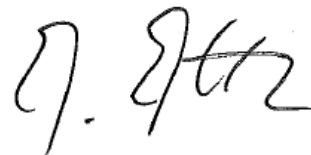

M. Matter

Leiter Qualitätssicherung