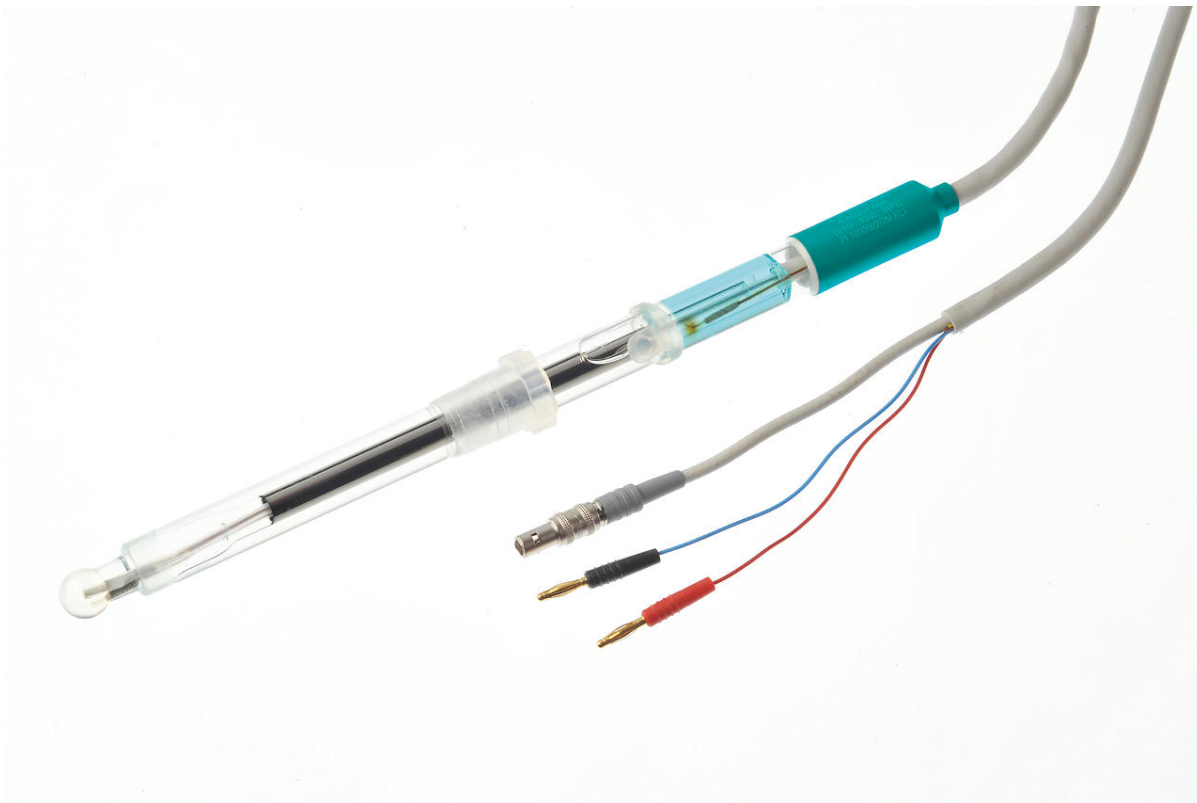




Aquatrode Plus con Pt1000 (cable fijo)

6.00257.000

Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m, clavija de banana de 2 mm) para medida de pH/titulación en medios acuosos pobres en iones (p. ej., agua potable, agua de proceso) y que también muestra un tiempo de respuesta extremadamente rápido en estas muestras.

El diafragma esmerilado fijo es insensible a la suciedad.

Con el uso de una $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito intermedio se recomienda el almacenamiento en una solución de conservación.

El electrolito intermedio se puede cambiar por un electrolito libre de cloruro (p. ej., nitrato potásico $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010)), con conservación en el electrolito utilizado.

Partes/accesorios 6.00257.000

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050

Sleeve with SGJ 14/12 mm

Sleeve with SGJ 14/12 mm, polyethylene.



1 PCS

6.2008.040

Storage vessel

Together with 6.2008.050 storage vessel holder. it provides a support for the electrode on 807 Dosing Units.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2103.150	Adapter red 4 mm plug / 2 mm soc Adapter for connecting electrodes with 2 mm plug to instruments with 4 mm socket (banana)	
6.2308.020	Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Electrolyte solution $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, (for Ag/AgCl reference systems)	
6.2310.010	Electrolyte KNO_3 -1 mol/L 250 mL Electrolyte solution KNO_3 1 M (reference electrolyte for combined silver electrodes)	
6.2323.000	Storage solution Storage solution for all combined pH glass electrodes with reference electrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$	

6.2325.000

pHit kit

Maintenance kit for pH electrodes

The kit contains:

- 50 mL cleaning solution
- 50 mL 3M KCl solution
- 50 mL storage solution
- 2 Storage vessels
- Instructions for use



6.2325.100

Cleaning solution 3 x 50 mL

Reliable measuring results over long periods of time can be guaranteed only if the pH glass membrane and the diaphragm receive preventive and regular care. Cleaning by etching with toxic chemicals or applying mechanical treatment to the diaphragm is not only complicated and expensive, it also accelerates the ageing of the pH glass electrode.

The cleaning solution was developed for easy and gentle cleaning of pH glass electrodes. Regular use can considerably prolong their service life.



This cleaning solution is also part of the pHHit kit.