



Metrosep Carb 2 - 150/2,0

6.01090.220

La versión microbore de la columna CI Metrosep Carb 2 - 150/2,0 es particularmente apta para la determinación de carbohidratos empleando eluyentes alcalinos y la detección amperométrica por impulsos. El material de la columna de intercambio de aniones ha sido realizado a base de un copolímero de estireno-divinilbenceno. Es estable dentro de la gama de pH = 0 a pH = 14 y separa monosacáridos y disacáridos. Además, también es apta para el análisis de alcoholes de azúcar, anhidroazúcares, oligosacáridos, etc. La capacidad de la columna ha sido optimizada de tal manera que se combina la separación rápida y las excelentes propiedades de separación.

Debido al bajo consumo de eluyente, es especialmente apta para el acoplamiento IC-MS.

Partes/accesorios 6.01090.220

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

2 PCS

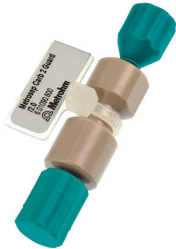
6.2744.060

Threaded stopper

For UNF 10/32. Stopper for IC, e.g. for the sealing of columns.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01090.600	Metrosep Carb 2 Guard/2.0	
	The Metrosep Carb 2 Guard/2.0 microbore guard column effectively removes contaminations, thus protecting the analytical separation column. The design of the guard column has been selected in such a way that its influence on the chromatographic separation can be ignored.	
6.01806.000	PEEK capillary, 0.18 mm ID / 2 m	
	For use in the high-pressure flow path, e.g. as preheating capillary for Metrosep Carb 2 columns in the 2 mm version (6.01090.2x0).	
6.1015.200	Metrosep BO3 Trap 1 - 100/4.0	
	Trap column for the removal of borate contaminants from the eluent. The Metrosep BO ₃ Trap 1 - 100/4.0 is used mainly in carbohydrate analysis with hydroxide eluents.	
6.1015.300	Metrosep CO3 Trap 1 - 100/4.0	
	Trap column for the removal of carbonate traces in hydroxide eluents.	