



NIRS DS2500 Petro Analyzer

2.929.2000

Robusta spettroscopia nel vicino infrarosso per il controllo qualità dei carburanti in laboratorio e nell'ambiente di produzione.

Il NIRS DS2500 Petro Analyzer è la soluzione flessibile e comprovata per il controllo di qualità e l'analisi di routine dei carburanti ed è conforme alla norma ASTM D6122. Insensibile a polvere, umidità e vibrazioni, il NIRS DS2500 Petro Analyzer può essere utilizzato tanto in laboratorio quanto direttamente nell'ambiente di produzione.

Il NIRS DS2500 Petro Analyzer copre l'intero intervallo spettrale da 400 a 2.500 nm e fornisce risultati precisi in meno di un minuto. Grazie alle precalibrazioni per benzina, diesel e cherosene, il NIRS DS2500 Petro Analyzer può essere utilizzato subito e supporta gli utenti nelle loro attività di routine quotidiane perché facile da utilizzare. In caso di quantità più grandi di campioni, è possibile aumentare notevolmente la produttività mediante l'impiego di celle di flusso in combinazione con un robot per campioni Metrohm.

Parti incluse 2.929.2000

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Robust near-infrared spectroscopy for quality control, not only in laboratories but also in production environments.


The DS2500 Liquid Analyzer is the tried and tested, flexible solution for routine analysis of liquids along the entire production chain. Its robust design makes the DS2500 Liquid Analyzer resistant to dust, moisture and vibrations, which means that it is eminently suited for use in harsh production environments.



The DS2500 Liquid Analyzer covers the full spectral range from 400 to 2500 nm, heats samples up to 80°C and is compatible with various disposable vials and quartz cuvettes. The DS2500 Liquid Analyzer is thus adaptable to your individual sample requirements and helps you obtain accurate and reproducible results in less than one minute. The integrated sample holder detection and the self-explanatory Vision Air Software also ensure simple and safe operation by the user.

In the case of larger-sized sample quantities, productivity can be considerably increased by using a flow-through cell in combination with a Metrohm sample robot.

Voucher for one pre-calibration. Entitles you to order pre-calibration of one fuel (diesel, gasoline, kerosine)

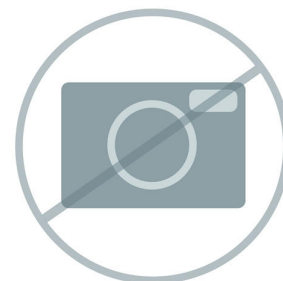

Vision Air - Universal spectroscopy software.

Vision Air Complete is a modern and simple-to-operate software solution for use in a regulated environment.



Overview of the advantages of Vision Air:

- Individual software applications with adapted user interfaces ensure intuitive and simple operation
- Simple creation and maintenance of operating procedures
- SQL database for secure and simple data management

The Vision Air Complete version (66072208) includes all applications for quality assurance using Vis-NIR spectroscopy:

- Application for instrument and data management
- Application for method development
- Application for routine analysis

Additional Vision Air Complete solutions:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

100 disposable glass vials (borosilicate) with an optical path length of 8 mm for analyses of liquids in transmission. The disposable vials are supplied with the associated stoppers (number of pieces = 100).

Compatible with:

- Holder OMNIS NIR, vial, 8 mm (6.07401.070)
- DS2500 holder for 8 mm disposable vials (6.7492.020)



1 PCS

6.7492.020

DS2500 Holder 8 mm vials

Intelligent holder for disposable glass vials with 8 mm diameter



1 PCS


6.7494.500

DS2500 Liquid Analyzer Heat Protection

DS2500 Liquid Analyzer Heat Protection as optional protection for analysis at high temperatures.



Accessori opzionali

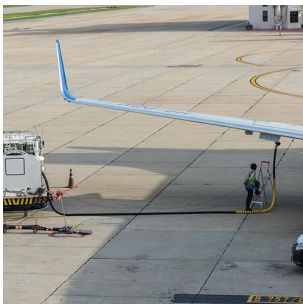Order no.	Descrizione	
6.6072.305	Pre-calibration for diesel analysis Determination of cetane index und cetane number, as well as density, cold filter plugging point, flash point and sulfur in diesel fuel.	
6.6072.306	Pre-calibration for gasoline analysis Determination of octane number, LCI, benzene, aromatic compounds, olefins, oxygen and density in gasoline.	
6.6072.307	Pre-calibration for kerosine analysis Determination of cetane index, aromatic compounds, density, flash point, hydrogen, viscosity and other parameters in kerosine.	
6.7430.050	Spare lamp for NIRS DS2500 Spare lamp with 12.0 V and 35 W for NIRS DS2500 Analyzer	

6.7494.000

DS2500 Liquid Wavelength Calibration Standard

Intelligent transmission wavelength calibration standard for the DS2500
Liquid Analyzer

